


## 液体蛋白酶 K 稳定性检测

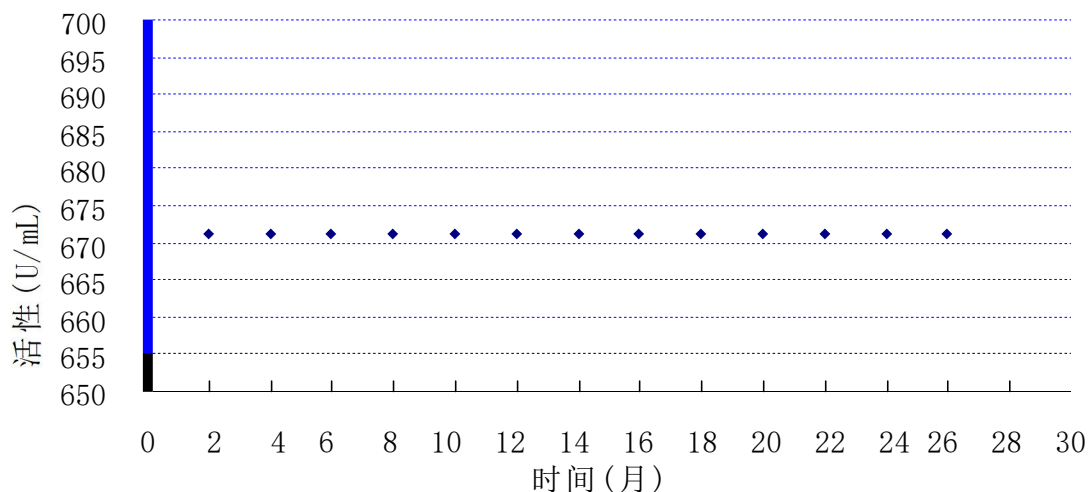

检测时间	液体蛋白酶 K 活性 (U/ml)
2012-12-28	680
2013-02-28	680
2013-04-29	680
2013-06-28	680
2013-08-28	680
2013-10-28	680
2013-12-27	680
2014-02-28	680
2014-04-28	680
2014-06-27	680
2014-08-28	680
2014-10-28	680
2014-12-29	680
2015-03-02	680

令 室温放置的液体蛋白酶 K 浓度为 20 毫克/毫升，含 20mM Tris pH7.4, 1mM CaCl<sub>2</sub>, 50%甘油, 0.1% 叠氮化钠。

令 4℃放置的液体蛋白酶 K 浓度为 20 毫克/毫升，含 20mM Tris pH7.4, 1mM CaCl<sub>2</sub>, 无菌过滤。

**检测结果：液体蛋白酶 K 在 4℃和室温保存 2 年，每 2 个月同时测活，数据见上表，活性没有变化。**